

Használati útmutató

USB Melegítő szemmaszk

Modell: VEM-200



 Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót

Tartalom

 Figyelmeztetés	3
1. Alkalmazási terület	3
2. A termék felépítése	3
3. Használati útmutató	4
4. Szemmaszk huzat.....	4
5. Karbantartás	4
6. Tisztítás	5
7. Specifikáció	5
8. A csomag tartalma.....	5
9. Hibaelhárítás.....	6

Figyelmeztetés

- 1) Kérjük, kizárólag a gyártó által biztosított eredeti hőmérséklet-szabályozó kábelt használja.
- 2) Kérjük, használjon CE vagy FCC és UL tanúsítvánnyal rendelkező hálózati adaptert vagy powerbankot.
- 3) Kérjük, óvatosan használja a szemmaszkot, és használat előtt gondosan ellenőrizze a hőmérsékletét.
- 4) Ha szembetegsége vagy sérülése van, illetve magas a szemnyomása, használat előtt konzultáljon orvosával.
- 5) Ha kellemetlen érzést tapasztal, hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.
- 6) Az egyéni bőrérzékenységi különbségek miatt, ha magas hőmérsékletet érez, kérjük, rövidítse le a használati időt, vagy függessze fel a használatát az alacsony hőmérsékletű égési sérülések elkerülése érdekében.
- 7) Kérjük, ne használjon szemmaszkot naponta két alkalomnál többször.
- 8) A szemmaszkban áramkör található. Kérjük, ne szerelje szét.
- 9) Kérjük, kapcsolja ki a készüléket, ha a szemmaszkot hosszabb ideig nem használja.
- 10) Kérjük, száraz és hűvös helyen tárolja, hogy elkerülje a nedvesség és a környezeti hatás okozta károsodást.
- 11) A szemmaszk használata 18 éven felülieknek ajánlott.
- 12) A szemmaszk nem játék, a fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a szemmaszkot csecsemőktől és gyermekektől.


1. Alkalmazási terület

A szemmaszk a melegítő hatás révén pihenteti a fáradt szemeket. A termék 750 alkalommal használható melegítésre.

2. A termék felépítése



1. ábra: szemmaszk

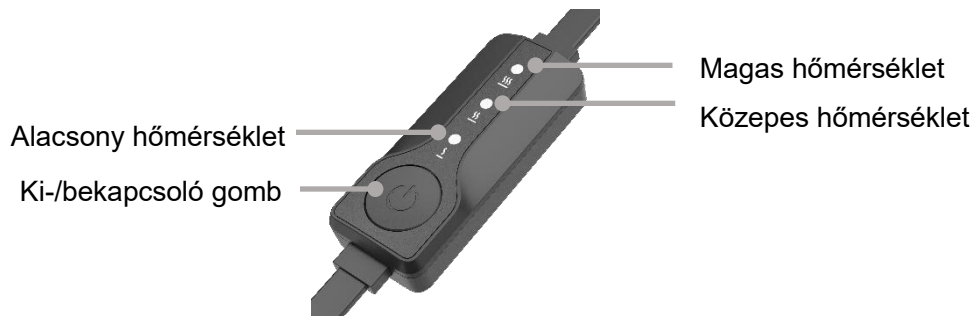

2. ábra: hőmérséklet-szabályozókábel

3. Használati útmutató

- 1) Csatlakoztassa a szemmaszkot a DC 5V/1A kimeneti feszültségű hálózati adapterhez/külső akkumulátorhoz a mellékelt hőmérséklet-szabályozó kábelrel.
- 2) A készülék bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot. Bekapcsoláskor a maszk a legmagasabb fokozaton indul. (44 °C / 111 °F).
- 3) A bekapcsológomb rövid megnyomásával válthat a 44 °C / 111 °F , 41 °C / 106 °F és 39 °C / 102 °F közötti hőmérsékleti opciók között. A hőmérsékleti jelölések a következők:

● (44°C/111°F) ● (41°C/106°F) ● (39°C/102°F)

12 perc melegítés után a szemmaszk automatikusan kikapcsol, vagy a folyamat a kikapcsológombbal bármikor manuálisan is megszakítható.

- 4) Vegye fel a szemmaszkot, és állítsa be a rugalmas pántot kényelmesre.
- 5) Igazítsa a rugalmas FlexStrippet az arcformájához.



⚠ Bekapcsoláskor a készülék automatikusan a legmagasabb hőmérsékleti szinten van (44 °C / 111 °F).

⚠ Kérjük, ne permetezzen vizet a szemmaszkra!

4. Szemmaszk huzat

A szemmaszk huzata cserélhető. Mosógépben mosható és szárítógépben szárítható. A huzat élettartama 60 melegítési ciklus. Ezt követően javasolt új huzatra cserélni.

5. Karbantartás

- A szemmaszkot óvni kell a párától és a szennyeződésektől.

- Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, ha a szemmaszk meghibásodott. Ne szerelje szét a szemmaszkt saját kezűleg.
- Kérjük, tartsa a szemmaszkt jól szellőző helyen, és kerülje az erős napsugárzást, valamint a maró hatású gázokkal vagy folyadékokkal való érintkezést
- A szemmaszk légi, vasúti, közúti és tengeri úton egyaránt szállítható. Kérjük, ügyeljen rá, hogy szállítás közben ne érje eső vagy hó, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne nyomódjon össze.
- Kérjük, tartsa a terméket gyermekek elől elzárva.

Vigyázat: Kérjük, ne tegye ki a terméket közvetlen napsugárzásnak vagy magas páratartalmú környezetnek. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, kérjük, tisztítsa meg, és tárolja a cipzáras tasakban.

6. Tisztítás

- 1) Kérjük, tisztítsa meg a felületen lévő szennyeződések egy tiszta ruhával.
- 2) Makacs szennyeződés esetén óvatosan törölje át semleges mosószerrel átitatott nedves ruhával.
- 3) Ügyeljen rá, hogy ne jusson víz a szemmaszk belsejébe.
- 4) Tartsa a terméket szárazon.

7. Specifikáció

Modell	VEM-200
Fűtési módszer	USB-csatlakozású tápellátás
Fűtési hőmérséklet	44 °C / 111 °F, 41 °C / 106 °F, 39 °C / 102 °F
Fűtési időtartam	12 perc
Bemeneti feszültség	5 V / 1 A egyenáram
Energiafogyasztás	4 W (maximum)
Szín	Grafitszürke
Termék mérete	22 x 7 cm
Súly	25 g

8. A csomag tartalma

Név	Mennyiség
Szemmaszk huzattal	1 db
Hőmérséklet- szabályozó kábel	1 db
Cipzáros táska	1 db
Használati útmutató	1 db

9. Hibaelhárítás

Hibás működés	Lehetséges ok	Megoldás
A szemmaszk nem termel hőt	1). A készülék ki van kapcsolva. 2). A készülék 12 perc fűtés után automatikusan kikapcsolt.	1). Röviden nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz. 2). Nyomja meg ismét röviden a gombot az újbóli bekapcsoláshoz.
A hőmérséklet-szabályozó jelzőfénye nem világít	1). A hőmérséklet-szabályozó kábel vagy a hálózati adapter meghibásodott. 2). A hőmérséklet-szabályozó kábel csatlakozása nem megfelelő.	1). Cserélje ki a hőmérséklet-szabályozó kábelt vagy a hálózati adaptert 2). Csatlakoztassa újra a hőmérséklet-szabályozó kábelt határozottan.

⚠ Amennyiben kipróbálta a fenti megoldást, de a szemmaszk továbbra sem működik, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz segítségért. Kérjük, ne szedje szét a szemmaszkt.